

Scheda di Iscrizione

Per partecipare prenota ora:

DENTAL POINT
Via Calamattia 10
09134 Cagliari
Tel.: 070.522334/35
dentalpoint@tiscali.it

Sede e data del corso	
Dr.	
Indirizzo	
Città	Cap
Prov	
Nato/a a	il
Tel.	Mail
Iscritto all'Albo di	n°
Codice Ftscale	
Partita Iva	

Autorizzo l'uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche ed invio mailing ai sensi della L. 196/103 sul trattamento dei dati.

Firma per accettazione

Programma

Hybrid concept :
come ottenere una sagomatura canalare rapida e sicura - corso teorico-pratico 14.00 - 19.00

Gli strumenti Mechanical Glide Path EndoWave Morita.

Il sistema coordinato localizzatore- motore endodontico: il DentaPort e il Tri Auto mini i vantaggi e svantaggi delle tecniche crowdown e simultanea.

Il glide path meccanico.

La determinazione del diametro apicale ,The Hybrid concept:'

Il sistema integrato per la sagomatura canalare.

Cenni di disinfezione ed obturazione del sistema canalare.

Per partecipare al corso gratuito (rmax 20 posti), è necessario effettuare la prenotazione contattando:

DENTAL. POINT
Via Calamattia 10
09134 Cagliari
Tel.070.522334/35
dentalpoint@tiscali.it



Corsi di Endodonzia gratuiti

Hybrid concept :
come ottenere una sagomatura canalare rapida e sicura

Thinking ahead. Focused on life.

**MORITA**

Introduzione

L'Endodontia, più delle altre branche dell'Odontoiatria, ha conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo tecnico e tecnologico torrenziale.

L'introduzione di strumenti elettronici in grado di definire con esattezza la lunghezza di lavoro ha messo la parola fine a molte delle incertezze procedurali; così come l'adozione di nuove leghe, quali il Nichel-Titanio, ha consentito di avere strumenti, via via più evoluti in grado di sagomare rapidamente il sistema dei canali radicolari. Di recente si è assistito alla proposizione in commercio di una IV generazione di strumenti, a cui appartengono gli Endowave, strumenti appositamente concepiti per sagomare il canale in piena sicurezza, riducendo a livelli molto bassi la probabilità di frattura degli stessi all'interno del sistema canale.

Questo corso ha lo scopo di far conoscere le ultime novità in Endodontia frutto della ricerca Morita, dagli ultimi micromotori endodontici agli strumenti Ni-Ti Endowave di ultima generazione, che i partecipanti al corso avranno la possibilità di provare in prima persona.

I partecipanti al corso riceveranno in omaggio due scatoline di lime Endowave Morita (Hybridkit ed MGP)

EndoWave Hybrid Concept 4th Generation NiTi files

Numerose pubblicazioni mostrano che il glide path ha effetti positivi quando si modella il canale radicolare con le lime rotanti Ni-Ti riducendo la percentuale di fratture degli strumenti. Oggi abbiamo a disposizione un ampio range di strumenti per effettuare un glide path sicuro - il "MGP" (Mechanical Glide path).

Combinando il concetto di glide path e la tecnica "crown down" è nato il "Hybrid Concept".


Stabilire il Glide Path



Situazione Iniziale:
Molare con interferenza dentale



Glide Path con file manuale o MGP 1 (ISO 010 / Taper 2)

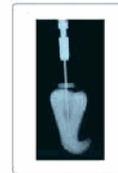


Per curvature più accentuate usare il kit completo del file MGP (10/02, 15/02, 20/02)

Nei casi più semplici il glide path può essere stabilito usando solo un file MGP ma nelle curvature più accentuate si raccomanda l'uso del kit completo dei tre file MGP.

Una volta stabilito il Glide Path si usa il 35/08 EndoWave per modellare la porzione coronale del terzo mediale del canale radicolare con un'azione di brushing anticurvatura.



Accesso in linea diretta e rimozione dell'interferenza dentale con il #35/08

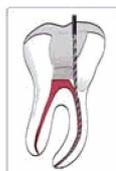

Determinazione della lunghezza di lavoro senza l'interferenza del terzo coronale



EndoWave 20/06 fino all'Apex



EndoWave 25/06 fino all'Apex

Dopo avere determinato elettronicamente la lunghezza di lavoro il 20/06 o il 25/06 possono rapidamente e facilmente raggiungere l'Apex; il canale radicolare è ora pronto per essere pulito ed otturato.

La gamma EndoWave comprende file di maggiori dimensioni 30/06, 40/06 per modellare canali più larghi e l'EndoWave 20/04, usato prima del 20/06 aiuta a raggiungere l'apice nelle curvature più severe.



New Kit Hybrid Concept

Relatore:
Dr. Corrado Sergi

Sede del Corso:
DENTAL POINT
Via Calamattia 10
09134 Cagliari

Data:
Venerdì, 15 Giugno 2012

Per Informazioni ed iscrizioni
DENTAL POINT
Via Calamattia 10
09134 Cagliari
Tel.: 070.522334/35
dentalpoint@tiscali.it